

Rheoli Torri esgyrn

NHS Canllaw Cynnyrch Cymru



Delta-Cast®



Am Essity

Mae **Essity** yn ddarparwr atebion iechyd a meddygol byd-eang blaenllaw sy'n arbenigo ym meysydd Gofal Clwyfau, Rheoli Torri esgyrn, Ffisiotherapi, Cywasgiad a Gofal Ymataliaeth. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu cynhyrchion brand o'r radd flaenaf sy'n cynnig atebion o ansawdd uchel i glinigwyr a chleifion fel ei gilydd.

I gael mwy o wybodaeth a chynghor am gynnyrch, cysylltwch â'n tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sydd bob amser yn barod i ateb eich ymholiadau neu gymryd manylion archebu dros y ffôn **0845 1223600**, neu drwy e-bost **archebion.uk@essity.com**

Tapiau Castio a Sblintio

Tâp Castio Di-ffibr

Delta-Cast® Conformable 5

Delta-Cast® Elite 6

Tâp Castio gwydr ffibr

Delta-Lite® Plus 7

Tâp Castio Hyblyg

Delta-Cast® Soft 8

Systemau Sblint Synthetig Acíwt

Dynacast® Prelude 9

Plastr Paris

Gypsona® 10

Specialist® E 10

Padio Undercast

Padio

Soffban® Natural 12

Soffban® Synthetic 12

Stockinette

Naturiol

Jersey Standard 14

Ategolion Castio

Ategolion

Tensoplast® Sport Cast Edge Tape 16

Delta Terry-Net® Adhesive Felt Liner 16

Delta Terry-Net® Adhesive Fleece Liner 17

Pecynnau Tyniant Croen

Tensoplast® Skin Traction Kits 17

Slingiau

Actimove® Sling 18

Actimove® Sling Comfort 18



Tapiau Castio a Sblintio

Fel rhan o bortffolio datrysiadau iechyd a meddygol Essity sy'n llwyddiannus yn fyd-eang, mae gan frand Delta-Cast® o dapiau castio yr adnoddau, y cyrhaeddiad a'r ymrwymiad i sicrhau eich bod chi'n derbyn cefnogaeth gynhwysfawr.

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu perthnasoedd gwaith agos, hirsefydlog gyda'n cwsmeriaid. Trwy'r perthnasoedd hyn, gallwn ddysgu mewnwelediadau gwerthfawr i farn a phryderon gweithwyr proffesiynol blaenllaw, gan helpu i arwain ein hymdrechion i wella ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Mae'r cydweithrediad hwn yn caniatáu inni ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau perthnasol ac arloesol o ansawdd uchel i gynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ofalu am eu cleifion.

Dangosir ein hymrwymiad i addysg broffesiynol gyda'n rhaglen Addysgol Essity PATH. Mae'n sail i'n cred bod cynnydd mewn gofal cleifion yn dibynnu ar ddatblygiad proffesiynol parhaus ac mae ein mentrau addysgol yn rhan annatod o'n perthynas â chlinigwyr.

Mae PATH yn blatfform addysg safon aur gyda dewis amrywiol o feysydd therapi ac arddulliau dysgu, i'ch helpu chi i ddarparu'r gofal gorau posibl i gleifion.

I ddarganfod mwy, cysylltwch â'ch Rheolwr Cyfrif lleol neu cysylltwch â ni ar: Ffôn: **01482 670177**
E-bost: **concierge.service@essity.com**

Tâp Cast Di-gwydr ffibr

Mae **Delta-Cast® Conformable** wedi gosod meincnod mewn tapiau cast safonol a symudadwy, di-wydr ffibr. Mae Delta-Cast® Conformable yn ymateb i heriau beunyddiol rheoli torri esgyrn - mae ei adeiladwaith nodedig yn darparu opsiynau castio anhyblyg a lled-anhyblyg ar gyfer cymwysiaidau castio cynradd ac eilaidd lle mae ffitrwydd, cysur a chydymffurfiad cleifion yn hollbwysig.

Delta-Cast® Conformable yw'r unig dâp cast yn y DU sydd â thystiolaeth glinigol¹ i gefnogi ei ddefnydd ar gyfer castio anhyblygedd â ffocws.

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
72280-00	2.5cm x 1.80m	○ Gwyn	1 x 10
72280-01	5cm x 3.6m	○ Gwyn	1 x 10
72280-02	7.5cm x 3.6m	○ Gwyn	1 x 10
72280-03	10cm x 3.6m	○ Gwyn	1 x 10
72280-04	12.5cm x 3.6m	○ Gwyn	1 x 10
72281-00	5cm x 3.6m	● Pinc	1 x 10
72281-01	7.5cm x 3.6m	● Pinc	1 x 10
72281-02	10cm x 3.6m	● Pinc	1 x 10
72282-00	5cm x 3.6m	● Glas tywyll	1 x 10
72282-01	7.5cm x 3.6m	● Glas tywyll	1 x 10
72282-02	10cm x 3.6m	● Glas tywyll	1 x 10
72283-00	5cm x 3.6m	● Melyn	1 x 10
72283-01	7.5cm x 3.6m	● Melyn	1 x 10
72283-02	10cm x 3.6m	● Melyn	1 x 10
72284-00	5cm x 3.6m	● Oren	1 x 10
72284-01	7.5cm x 3.6m	● Oren	1 x 10
72284-02	10cm x 3.6m	● Oren	1 x 10
72285-00	5cm x 3.6m	● Coch	1 x 10
72285-01	7.5cm x 3.6m	● Coch	1 x 10
72285-02	10cm x 3.6m	● Coch	1 x 10
72286-00	5cm x 3.6m	● Porffor	1 x 10
72286-01	7.5cm x 3.6m	● Porffor	1 x 10
72286-02	10cm x 3.6m	● Porffor	1 x 10
72287-00	5cm x 3.6m	● Gwyrdd	1 x 10
72287-01	7.5cm x 3.6m	● Gwyrdd	1 x 10
72287-02	10cm x 3.6m	● Gwyrdd	1 x 10
72288-00	5cm x 3.6m	● Du	1 x 10
72288-01	7.5cm x 3.6m	● Du	1 x 10
72288-02	10cm x 3.6m	● Du	1 x 10
72289-10	5cm x 3.6m	Cymysg†	1 x 10
72289-11	7.5cm x 3.6m	Cymysg†	1 x 10
72289-12	10cm x 3.6m	Cymysg†	1 x 10

†Mae pecynnau cymysg yn cynnwys dwy rolyn yr un o las tywyll, du, coch, porffor a phinc

Rhwymyn polyester ymestyn 3-D perfformiad uchel

- Mae cydymffurfiaeth ragorol yn caniatáu cymhwysiad di-dor heb yr angen i daflu a phlygu, a heb grebachu
- Mae ymestyn 3-D yn helpu i orchuddio cyfuchliniau corff anodd hyd yn oed ar yr un pryd i helpu i gynhyrchu castiau heb grychau, heb bwyntiau pwysau
- Gwydnwch a gwydnwch hirhoedlog ar gyfer y dadansoddiad cast lleiaf posibl

Fformiwla resin patent

- Mae resin silicon a di-latecs wedi'i gynllunio i gefnogi rhwyddineb ei gymhwyso ac i sicrhau lamineiddiad cryf, hirhoedlog, gan gynnig:
 - Amserau penodol cyson a dibynadwy
 - Mae lamineiddiad uchel o haenau a phen yn gorwedd i lawr ar gyfer y sefydlogrwydd, cryfder a dibynadwyedd gorau posibl
 - Synhwyro llyfn yn ystod y mowldio sy'n arwain at orffeniad llyfn i'r cast
 - Cais gydag unrhyw fenig arholiad safonol

Opsiynau dirifedi

- Mae anhyblygedd amlbwrpas yn galluogi'r ymarferydd i gynhyrchu naill ai castiau cyswllt cyfanswm traddodiadol (TCC) neu gastiau anhyblygedd â ffocws (FRC) gydag un cynnyrch yn unig
- Gellir gwneud castiau symudadwy a'u hail-gymhwyso i gael mwy o reolaeth ar y broses iacháu



1. Mân. A. C., Wardman. C., (1998). Cymhariaeth ar hap, dan reolaeth, o dechneg castio sylfaenol anhyblygedd â ffocws wedi'i haddasu â phlastr safonol Paris / techneg castio synthetig wrth reoli toriadau ac anafiadau eraill. Cyfnodolyn Nyrso Orthopedig. 2. 95 - 102

Tâp Cast Di-Gwydr Ffin

Defnyddir ar gyfer ceisiadau castio cynradd ac uwchradd, **Delta-Cast® Elite** wedi'i gynllunio gyda hawdd i'w gymhwyso a chysur cleifion mewn golwg. Mae ein deunydd castio di-wydr ffibr patent yn cyfuno cryfder ac anhyblygedd ag ymylon meddal er cysur cleifion.

Di-wydr ffibr

- Yn darparu ymylon cast llyfn a meddal ar gyfer gwell cysur i gleifion

Deunydd castio polyester hynod gydnaws

- Cryfder uchel, anhyblygedd a gwydnwch
- Yn cydymffurfio'n hawdd â chyfuchliniau'r corff heb blygu na chuddio er mwyn cynyddu cysur cleifion
- Mae gorffeniad llyfn y cast yn lleihau'r rhwystr posibl ar ddillad a llid y croen

Amser gosod cyson

- Yn gosod mewn tua thri munud ac yn dwyn pwysau'n llawn ar ôl 20 munud

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
72279-00	5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72279-01	7.5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72279-02	10cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72279-03	12.5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72278-00	5cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
72278-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
72278-02	10cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
72276-00	5cm x 3.6m rholio	● Glas tywyll	1 x 10
72276-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Glas tywyll	1 x 10
72276-02	10cm x 3.6m rholio	● Glas tywyll	1 x 10
72277-00	5cm x 3.6m rholio	● Porffor	1 x 10
72277-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Porffor	1 x 10
72277-02	10cm x 3.6m rholio	● Porffor	1 x 10
72275-00	5cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
72275-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
72275-02	10cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
73455-00	5cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
73455-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
73455-02	10cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
73453-00	5cm x 3.6m rholio	● Glas golau	1 x 10
73453-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Glas golau	1 x 10
73453-02	10cm x 3.6m rholio	● Glas golau	1 x 10
73454-00	5cm x 3.6m rholio	● Gwyrdd	1 x 10
73454-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Gwyrdd	1 x 10
73454-02	10cm x 3.6m rholio	● Gwyrdd	1 x 10
73456-00	5cm x 3.6m rholio	● Oren	1 x 10
73456-01	7.5cm x 3.6m rholio	● Oren	1 x 10
73456-02	10cm x 3.6m rholio	● Oren	1 x 10



Tâp Cast Fiberglass

Delta-Lite® Plus yn dâp cast gwydr ffibr llyfn, gwydn sy'n cyfuno swbstrad gwydr ffibr a system resin polywrethan ag eiddo di-dac. Mae'r eiddo di-dac yn caniatáu rhwyddineb eu cymhwyso a'u mowldio gan ddefnyddio menig arholiad safonol.

Arwyneb gorffen llyfn

- Mae cast gorffenedig nad yw'n sgraffiniol yn gwella cysur cleifion

Cefnogaeth anhyblyg ardderchog

- Yn creu cast hirhoedlog, ysgafn

Lamineiddiad uchel

- Yn rhoi cryfder rhwng haenau cast
- Gwell cryfder cast

Cydymffurfiaeth dda

- Yn gwneud cais castio yn haws o amgylch holl gyfuchliniau'r corff
- Nid oes angen technegau ymgeisio arbennig

Mowldio rhagorol

- Yn darparu cefnogaeth anatomegol ragorol

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
73458-00	2.5cm x 1.8m rholio	○ Gwyn	1 x 10
73458-01	5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
73458-02	7.5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
73458-03	10cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
73458-04	12.5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
73458-55	5cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
73458-56	7.5cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
73458-57	10cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
73458-20	5cm x 3.6m rholio	● Glas tywyll	1 x 10
73458-21	7.5cm x 3.6m rholio	● Glas tywyll	1 x 10
73458-22	10cm x 3.6m rholio	● Glas tywyll	1 x 10
73458-30	5cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
73458-31	7.5cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
73458-32	10cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
73458-60	5cm x 3.6m rholio	● Porffor	1 x 10
73458-61	7.5cm x 3.6m rholio	● Porffor	1 x 10
73458-62	10cm x 3.6m rholio	● Porffor	1 x 10
73458-35	5cm x 3.6m rholio	● Glas golau	1 x 10
73458-36	7.5cm x 3.6m rholio	● Glas golau	1 x 10
73458-37	10cm x 3.6m rholio	● Glas golau	1 x 10
73458-45	5cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
73458-46	7.5cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
73458-47	10cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
73458-25	5cm x 3.6m rholio	● Gwyrdd	1 x 10
73458-26	7.5cm x 3.6m rholio	● Gwyrdd	1 x 10
73458-27	10cm x 3.6m rholio	● Gwyrdd	1 x 10
73458-65	5cm x 3.6m rholio	● Melyn	1 x 10
73458-66	7.5cm x 3.6m rholio	● Melyn	1 x 10
73458-67	10cm x 3.6m rholio	● Melyn	1 x 10
73458-75	5cm x 3.6m rholio	● Oren	1 x 10
73458-76	7.5cm x 3.6m rholio	● Oren	1 x 10
73458-77	10cm x 3.6m rholio	● Oren	1 x 10



Tâp Castio Hyblyg

Delta-Cast® Soft wedi'i gynllunio i ddarparu cefnogaeth swyddogaethol i doriadau ac anafiadau meinwe meddal. Mae ei lled-anhyblygedd yn caniatáu hyblygrwydd a symudedd, gan helpu i leihau problemau sy'n gysylltiedig â symud fel atroffi cyhyrau ac anystwythder ar y cyd. Gall gwell hyblygrwydd a symudedd helpu i hyrwyddo proses iacháu gyflymach.

Mae Delta-Cast® Soft wedi'i adeiladu gan ddefnyddio cyfuniad o edafedd polyester, polypropylen ac elastane uwch-dechnoleg, ynghyd â resin a ddatblygwyd yn arbennig. Mae'r dechnoleg hon yn adeiladu diogelwch, ymarferoldeb a chysur i mewn i gynnyrch sy'n cynnig yr holl fanteision dim ond tâp castio gwydr ffibr y gall ei gynnig.

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
72708-02	2.5cm x 1.8m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72708-12	5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72708-22	7.5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72708-32	10cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72708-42	12.5cm x 3.6m rholio	○ Gwyn	1 x 10
72708-05	5cm x 3.6m rholio	● Glas	1 x 10
72708-15	7.5cm x 3.6m rholio	● Glas	1 x 10
72708-25	10cm x 3.6m rholio	● Glas	1 x 10
72708-08	5cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
72708-18	7.5cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
72708-28	10cm x 3.6m rholio	● Coch	1 x 10
72708-50	5cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
72708-51	7.5cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
72708-52	10cm x 3.6m rholio	● Pinc	1 x 10
72708-01	5cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
72708-11	7.5cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
72708-21	10cm x 3.6m rholio	● Du	1 x 10
72708-09	5cm x 3.6m rholio	🐾 Print pawl	1 x 10
72708-19	7.5cm x 3.6m rholio	🐾 Print pawl	1 x 10
72708-60	5cm x 3.6m rholio	🩹 Print calon	1 x 10
72708-61	7.5cm x 3.6m rholio	🩹 Print calon	1 x 10

Ymestyn tair ffordd / cydymffurfiaeth ragorol

- Rhwyddineb trin ar gais
- Yn caniatáu ffitio'n gyson o amgylch cyfuchliniau anodd y corff gyda chais heb grychau, gan gynnig gwell ffitrwydd a chefnogaeth i'r claf

Gwydr di-ffibr

- Hynod o wydn i gynnal ymarferoldeb cast, gan helpu i leihau amser a chostau ar gyfer yr ystafell gast a all fod yn gysylltiedig ag atgyweirio cast

Amrywiaeth o liwiau a dyluniadau unigryw

- Ar gael mewn print pawen patent, dyluniadau calon neu liw, gan gynnig cast mwy chwareus, dymunol i gleifion o bob oed
- Mae'n helpu i gefnogi cydsyniad a swyddogaeth cleifion

Cais amryddawn

- Wedi'i gynllunio ar gyfer castiau symudadwy wedi'u haddasu a chymwysiaidau crwn, mae'n hawdd tocio Delta-Cast® Soft i siapio, gan gynhyrchu'r ffit orau i'r claf
- Gellir ei gyfuno â strapiau bachyn a dolen ar gyfer cymwysiaidau symudadwy, neu gyda deunyddiau atgyfnerthu ar gyfer cefnogaeth gryfach

100% Radioluent

- Yn caniatáu delweddau pelydr-X clir ar gyfer diagnosis, gan gynnig arbedion cost ac amser

Hyblygrwydd

- Gall helpu i leihau rhai o effeithiau negyddol ansymudiad anhyblyg llwyr; atroffi cyhyrau, stiffwrwydd ar y cyd a materion eraill sy'n gysylltiedig ag ansymudiad
- Gall gwell cylchrediad helpu tuag at broses iacháu gyflymach a chyfnod adsefydlu byrrach

Rhwyddineb ei symud

- Gellir ei dynnu trwy godi a dadosod
- Nid oes angen llif cast. Gellir ei dynnu gan ddefnyddio siswrn cast rheolaidd

Lamineiddiad rhagorol

- Mae lamineiddio haenau rhagorol a gosod pen da yn cynhyrchu cast cryf, wedi'i bondio'n dda



System Sblint Synthetig Acíwt

Dynacast® Prelude yn system sblintio gwydr ffibr aciwt sy'n ymgorffori gwydr ffibr yn benodol, wedi'i orchuddio â padin polypropylen. Yn gryfach ac yn fwy amlbwrpas na phlastr traddodiadol Paris, mae'n ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau trawma ac ôl-op o'r cyfnod aciwt i'r cyfnod adsefydlu.

Cryf, ysgafn a gwydn

- Mae gwydr ffibr wedi'i orchuddio â resin yn darparu sblint cryfder uchel sy'n gallu gwrthsefyll chwalu
- Ni fydd yn chwalu pan fydd yn wlyb

Gosodiad cyflym a dwyn pwysau cynnar

- Mae gan Dynacast® Prelude set gychwynnol o 3 - 5 munud ac mae'n cyrraedd cryfder dwyn pwysau mewn oddeutu 20 munud

Dim llanast na gwastraff

- Heb unrhyw lanast plastr, mae Dynacast® Prelude yn ddelfrydol ar gyfer amgylchedd y theatr a'r ward
- Mae'r fformat rholio parhaus yn sicrhau y bydd clinigwyr yn defnyddio'r hyn sy'n ofynnol yn unig ac yn darparu amlochredd i ddewis hyd sblint i weddu i'r arwydd a'r claf

Cysur cleifion

- Mae padin polypropylen meddal yn gorchuddio'r sblint gwydr ffibr gan leihau'r risg o bwyntiau pwysau
- Yn naturiol mae'n cynorthwyo trosglwyddiad lleithder i ffwrdd o'r croen i wella cysur cleifion

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
71418-00	2.5cm x 4.6m rholio	Gwyn	1 x 1
71420-00	5cm x 4.6m rholio	Gwyn	1 x 1
71421-00	7.5cm x 4.6m rholio	Gwyn	1 x 1
71415-00	10cm x 4.6m rholio	Gwyn	1 x 1
71416-00	12.5cm x 4.6m rholio	Gwyn	1 x 1
71417-00	15cm x 4.6m rholio	Gwyn	1 x 1
71419-00	20cm x 2.3m rholio	Gwyn	1 x 1

Technoleg ILS (cryfder sy'n cyd-gloi)

- Yn darparu cryfder a gwydnwch
- Yn lleihau crychau a chribau yn y sblint gorffenedig



Plastr Paris

Gypsona® mae plastr premiwm rhwymyn Paris wedi'i wneud o frethyn gwehyddu leno wedi'i wehyddu'n arbennig, wedi'i drwytho'n unfurf â phlastr Paris, hufennog, cyflym o ansawdd uchel sy'n cynhyrchu cast cryf gyda gorffeniad rhagorol. Ar gael ar ffurf rholio a slab 5-ply.

Rhwyllen gwehyddu leno cyd-gloi

- Mae'n darparu sefydlogrwydd a chydymffurfiaeth rhagorol
- i'r rhwymyn gwlyb
- Yn lleihau colli plastr
- Yn darparu cast gorffenedig cryf

Fformiwla plastr llyfn, hufennog

- Yn caniatáu ar gyfer cast llyfn sy'n plesio'n esthetaid
- Gwell priodweddau mowldio a gorffeniad rhagorol

Dyluniad ymyl rhwymyn Nicked

- Yn sicrhau cyn lleied â phosibl o edafedd twyllo a rhydd yn ystod y cais
- Yn cefnogi gorffeniad cast llyfnach

Craidd crwn

- Gwell sefydlogrwydd trin

Côd	Maint	Pecyn Qty
71985-04	5cm x 2.7m rholio	1 x 48
71985-05	7.5cm x 2.7m rholio	1 x 48
71985-00	10cm x 2.7m rholio	1 x 48
71985-02	15cm x 2.7m rholio	1 x 24
71985-03	20cm x 2.7m rholio	1 x 24
71988-14	10cm x 20m Dosbarthwr slabiau 5-ply	1 x 1
71988-15	15cm x 20m Dosbarthwr slabiau 5-ply	1 x 1
71988-16	20cm x 20m Dosbarthwr slabiau 5-ply	1 x 1



Specialist® E

Plastr Paris

Specialist® E mae gan blastr Paris wead hufennog sy'n arwain at deimlad llyfn, ac sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei gymhwyso. Mae'n ffurfio cast sy'n ffitio'n dda ac sy'n galonogol o galed ac yn gryf. Dyma'r dewis delfrydol ar gyfer castio cymwysiadu lle mae angen amser gosod cyflym. Ar gael ar ffurf rholio a slab 5-ply.

Gwead llyfn, hufennog

- Yn arwain at gast llyfn, wedi'i orffen yn gyfartal
- Colled plastr lleiaf

Houldable iawn a chryf

- Yn cynhyrchu ffit ardderchog o amgylch corff anodd
- cyfuchliniau ac yn cyflwyno cast wedi'i lamineiddio'n dda

Hawdd i'w gymhwyso a'i dynnu

- Yn gallu 'ffenestrio' y cast ar ôl dim ond 10 munud

Pecynnu gwrth-leithder

- Yn amddiffyn ac yn ymestyn oes silff y cynnyrch

Côd	Maint	Pecyn Qty
72260-00	5cm x 2.7m rholio	1 x 12
72260-01	7.5cm x 2.7m rholio	1 x 12
72260-02	10cm x 2.7m rholio	1 x 12
72260-04	15cm x 2.7m rholio	1 x 12
72260-05	20cm x 2.7m rholio	1 x 12





Padio Undercast

Essity yn cynnig ystod eang o opsiynau padio i'w defnyddio ar y cyd â phlastr Paris a thapiau castio synthetig. Mae Soffban® Natural yn cynnig manteision padin naturiol gydag amsugno rhagorol, gan eu gwneud ill dau yn gynnyrch delfrydol at ddefnydd theatr.

Soffban® Synthetic a Delta-Rol® S yn ddeunydd synthetig nad yw'n amsugol ac felly'n cadw clustogau rhagorol pan fydd yn wlyb i roi mwy o gysur i gleifion. Mae Delta-Rol® S hefyd yn ymgorffori cefnogaeth ewyn mân iawn, sy'n dileu'r angen i ddefnyddio cyn-dâp ar wahân i orffen yn llyfn.

Padio Viscose Naturiol

Soffban® Natural mae padin yn addas i'w ddefnyddio gyda phlastr Paris a chastiau synthetig i gynorthwyo cysur.

Côd	Maint	Pecyn Qty
71472-00	5cm x 2.7m rholio	1 x 12
71473-00	7.5cm x 2.7m rholio	1 x 12
71469-00	10cm x 2.7m rholio	1 x 12
71470-00	15cm x 2.7m rholio	1 x 12
71471-00	20cm x 2.7m rholio	1 x 6

Fiscos naturiol amsugol iawn

- Yn addas i'w ddefnyddio lle gall gwaeddu ddigwydd
- Yn wlychu lleithder i ffwrdd o'r croen
- Yn lleihau'r risg o faeddu croen a sensitifrwydd

Amlbwrpas

- Mae Soffban® Natural hefyd yn addas ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer therapi bandio aml-haen wisger coes gwythiennol fel yr haen gyntaf*



Hawdd i'w gymhwyso

- Cydymffurfiaeth ragorol o amgylch cyfuchliniau'r corff
- Hawdd i'w rhwygo
- Plu'n hawdd ac yn glynu wrtho'i hun
- Cymysgeddau i roi gorffeniad llyfn

Autoclavable

- Gellir ei sterileiddio
- Nid oes angen tynnu'r deunydd lapio papur
- Ryon viscose 100%

Meddal

- Yn gyffyrddus i'r claf, yn feddal ac yn dyner yn erbyn y croen

Clustogi rhagorol

- Mae strwythur padio yn creu deunydd sy'n ysgafn, yn ddwfn ac yn sefydlog, gyda llif aer da
- Yn amddiffyn rhag deunydd castio anhwylyg
- Mae hefyd yn amddiffyn y llif cast wrth dynnu cast

Soffban® Synthetic

Padio Synthetig

Soffban® Synthetic mae padin yn addas i'w ddefnyddio gyda phlastr Paris a chastiau synthetig.

Deunydd synthetig nad yw'n amsugno

- Yn wlychu lleithder i ffwrdd o'r croen
- Yn lleihau'r risg o faeddu croen a sensitifrwydd
- Mae clustogi 'llofft' yn cael ei gadw hyd yn oed os bydd padin yn gwlychu

Hawdd i'w gymhwyso

- Cydymffurfiaeth ragorol o amgylch cyfuchliniau'r corff
- Hawdd i'w rhwygo
- Plu'n hawdd ac yn glynu wrtho'i hun
- Cymysgeddau i roi gorffeniad llyfn

Clustogi a theimlad meddal rhagorol

- Mae strwythur padio yn creu deunydd sy'n ysgafn, yn ddwfn ac yn sefydlog, gyda llif aer da
- Yn amddiffyn y claf sydd â llai o risg o sgrafelliadau croen
- Mae hefyd yn amddiffyn y llif cast wrth dynnu cast
- Yn gyffyrddus i'r claf, yn feddal ac yn dyner yn erbyn y croen

Côd	Maint	Pecyn Qty
71464-01	5cm x 2.7m rholio	1 x 12
71467-01	7.5cm x 2.7m rholio	1 x 12
71486-05	10cm x 2.7m rholio	1 x 12
71465-01	15cm x 2.7m rholio	1 x 12
71466-01	20cm x 2.7m rholio	1 x 6

Autoclavable

- Gellir ei sterileiddio
- Nid oes angen tynnu'r deunydd lapio papur





Stockinette

Jersey Standard yn stocfa draddodiadol sy'n cynnig amddiffyniad a chysur i gleifion.

Jersey Standard

Stockinette Ribbed Naturiol

Jersey standard yn stocinette cotwm naturiol. Mae'n addas i'w ddefnyddio gyda deunyddiau castio synthetig neu blastr Paris.

Cotwm naturiol

- Meddal ac ysgafn i groen y cleifion gyda llai o risg o lid ar y croen

Autoclavable

- Yn cyd-fynd â sterileiddio stêm ac ethylen ocsid



Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
72021-02	3cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1
72021-03	5cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1
72021-04	7cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1
72021-05	10cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1
72021-07	15cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1
72021-08	20cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1
72021-10	25cm x 25m rholio	Naturiol	1 x 1



Ategolion Castio

Mae Essity yn cynnig ystod gynhwysfawr o ategolion i gwblhau'r ystod cynnyrch rheoli torri esgyrn.

Ategolion Castio Anhyblygedd â Ffocws (FRC) fel **Delta Terry-Net® Adhesive Fleece Liner** ategu'r **Delta-Cast® Conformable** a **Jersey Standard** cynhyrchion stoc stoc.

Fersiynau gludiog a heb ludiog o **Tensoplast® Skin Traction Kits** yn addas i'w defnyddio gydag amrywiaeth o ddulliau tyniant, ac mae Essity hefyd yn cynnig ystod o esgidiau cast i ddarparu amddiffyniad hanfodol i unrhyw gast.

Tensoplast® Sport

LATEX
FREE
FORMULA

Tâp Edge Cast

Tensoplast® Sport mae tâp ymyl elastig gyda glud tramline yn darparu ymylon meddal i gastiau a sblintiau, ac mae'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ymylu Castiau Anhyblygrwydd â Ffocws (FRC). Mae'r rhan ganolog, uchel yn ei gwneud hi'n hawdd plygu dros ymylon cast.

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
71548-00	3cm x 2.5m rholio	Gwyn	1 x 1



Gludyn tramline

- Yn lân ac yn hawdd glynu wrth ddeunyddiau castio a thermoplastigion

Gorffeniad meddal

- Er mwy o gysur i gleifion

Adran ymestyn uchel ganolog

- Hawdd trin y tâp ymylu dros ymyl y cast i gynhyrchu gorffeniad cyfforddus, taclus i'r cast

Delta Terry-Net® Adhesive Felt Liner

LATEX
FREE
FORMULA

Clustogi Undercast

Delta Terry-Net® Adhesive Felt Liner yn ddalen o ffelt orthopedig, a ddefnyddir pan fydd angen cysur ychwanegol i gleifion. Mae'r ffelt yn ddelfrydol ar gyfer amddiffyn unrhyw amlygiadau esgyrnog o dan gast.

Cefnogaeth gludiog o ansawdd uchel

- Roedd Secures yn teimlo lle rydych ei angen


Gorffeniad meddal

- Er gwell cysur i gleifion

Fformat y ddalen

- Gellir ei dorri i'r maint a'r siâp a ddymunir yn ôl yr angen

Côd	Maint	Lliw	Pecyn Qty
72295-05	58cm x 100cm	Gwyn	1 x 1

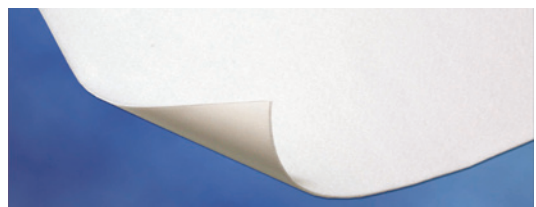

Delta Terry-Net® Adhesive Fleece Liner

LATEX
FREE
FORMULA

Cnu Ymylon Cast

Côd	Maint	Pecyn Qty
72995-07	3cm x 13.7m rholio	1 x 1



Delta Terry-Net® Adhesive Fleece Liner yn darparu ymyl meddal, padio i gastiau a sblintiau ac mae'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ymylu Castiau Anhyblygedd â Ffocws (FRC). Gyda darn uchel mae'n hawdd padio o amgylch corneli a chyfuchliniau, gan roi gorffeniad cast llyfn a chyffyrddus. Mae ganddo glud o ansawdd uchel ar gyfer lleoliad diogel.

Ymestyn uchel

- Yn ei gwneud hi'n hawdd padio o amgylch corneli a chyfuchliniau gan arwain at gast taclus, mwy cyfforddus i'r claf

Cefnogaeth gludiog o ansawdd uchel

- Yn sicrhau leinin cnu lle mae ei angen arnoch chi

Gorffeniad meddal

- Er gwell cysur i gleifion

Tensoplast® STK

LATEX
FREE
FORMULA

Pecynnau Tyniant Croen

Tensoplast® STK yn becyn parod i'w ddefnyddio, gan gynnwys yr holl eitemau sydd eu hangen i gymhwyso cymorth pwysau tyniant parhaus yn ddiogel, ac sy'n addas i'w ddefnyddio gydag amrywiaeth o ddulliau tyniant.

Mae Tensoplast® STK ar gael mewn fersiwn gludiog a heb fod yn gludiog.

Côd	Maint	Pecyn Qty
71544-00	Gludiog: oedolyn	1 x 12
71554-00	Gludiog: plentyn	1 x 12
71555-00	Di-gludiog: oedolyn	1 x 12
71556-00	Di-gludiog: plentyn	1 x 12



Fersiwn gludiog

- Gludiog clir, isel-alergedd, sensitif i bwysau ar gyfer adlyniad diogel, dibynadwy i'r aelod

Fersiwn nad yw'n gludiog

- Haen cyswllt croen ewyn, yn gallu anadlu ac yn addas ar gyfer croen tyner

Platiau troed padio

- Cefnogaeth gyffyrddus i'r droed

Rhwymyn elastig cydffurfiol

- Rhwyddineb cais i roi lleoliad diogel

Actimove® Sling and Sling Comfort

Wedi'i gynllunio i gynnal y fraich, y penelin a'r ysgwydd trwy gyfyngu ar yr ystod o symudiadau yn y cymalau ysgwydd a phenelin. Mae'r ddau sling yn radiolucet ac yn rhydd o fetel yn ogystal â bod yn beiriant golchadwy ar 40°C

Arwyddion:

- Rheoli toriad fel clavicle, scapular, humeral, a mwy o doriadau tuberosity
- Dislocations ar y cyd fel dislocations acromioclavicular a sternoclavicular a moethusrwydd ysgwydd
- Cefnogwch wrth wisgo cast neu sblint
- Sefydlogi braich dros dro mewn gofal brys

Actimove® Sling

LATEX
FREE
FORMULA

Sling Braich Ymarferol

Côd	Mesuriadau	Pecyn Qty
73425-12	3.6cm x10.8m	1 x 1 roll



- Dosbarthu hawdd trwy'r system agoriadol uchaf
- Cymhwyso sling hawdd a'i dynnu heb darfu ar y gosodiadau bachyn a dolen
- Radiolucet
- Heb fetel
- Peiriant golchadwy ar 40°C

Actimove® Sling Comfort

LATEX
FREE
FORMULA

Sling Braich Sefydlog

Côd	Mesuriadau	Pecyn Qty
72859-18	5.5cm x 12m	1 x 2 rolls



- Mae'r sling ehangach 5.5cm yn darparu cysur trwy leihau pwysau ar gefn y gwddf
- Mae blwch dosbarthwr sy'n cynnwys canllaw mesur defnyddiol yn cynorthwyo ei gymhwyso'n hawdd
- Clymu bachyn a dolen Y-tab wedi'i gynnwys yn y blwch dosbarthwr
- Radiolucet
- Heb fetel
- Peiriant golchadwy ar 40°C



Delta-Cast®,
an Essity brand



Essity
T/A BSN medical Limited
PO Box 258 • Willerby • Hull • HU10 6WT

www.medical.essity.co.uk
Ffôn: 01482 670100 • Ffacs: 01482 670111
E-bost: orders.uk@essity.com